





Io sono Luigi Salerno e questa é la mia interpretazione del beauty quando incontra la tecnologia.

KS Health and Beauty è un'idea che porto con me da tempo.

È il punto in cui si incontrano le mie passioni: il design e l'elettronica. Non li considero due mondi separati. Per me sono un unico linguaggio, un filo continuo che parte dal concept e arriva alla realizzazione, guidato da come vivo, da come sento la tecnologia e dal desiderio di usarla per creare esperienza, non solo prestazione.

Progetto da sempre. Nel tempo questa attitudine mi ha portato verso l'industrial design e, anno dopo anno, mi ha costretto a cambiare prospettiva, ad adattarmi ai contesti, a rendere più chiaro il mio tratto. Continuo a guardare alle icone del design e alle idee che hanno segnato la storia, perché mi ricordano che la forma non è mai un esercizio: è una scelta e racconta un'intenzione.


Dentro KS convivono tre anime distinte che mi ispirano e guidano in ogni tecnologia che sviluppo.
Lo stile Puro nasce dall'essenzialità.
Lo stile Moderno cerca equilibrio e misura.
Lo stile Sofisticato lavora sul dettaglio, con un approccio più decorativo.

Elettronica e meccanica di precisione: tecnologie affidabili e progettate per lavorare ogni giorno con performance stabili e controllo reale dei parametri.

In KS Health and Beauty abbiamo costruito nel tempo una filiera produttiva tutta italiana che ci consente di industrializzare soluzioni complesse gestite da circuiti programmabili e componenti selezionati.

Ogni dispositivo nasce da un lavoro di riprogettazione che integra competenze in elettronica, elettrotecnica, chimica, fisica, energia, materiali e design industriale, per trasformare la tecnologia in un'esperienza operativa semplice e sicura.

Questo approccio si traduce in miglioramenti concreti per i nostri partner: maggiore durabilità grazie a materiali più resistenti, più ergonomia per una presa e un utilizzo fluidi, più affidabilità e precisione attraverso interventi su elettronica e componentistica, versatilità con piattaforme evolutive e, dove possibile, ottimizzazione di produzione e assemblaggio per contenere i costi senza compromettere gli standard.

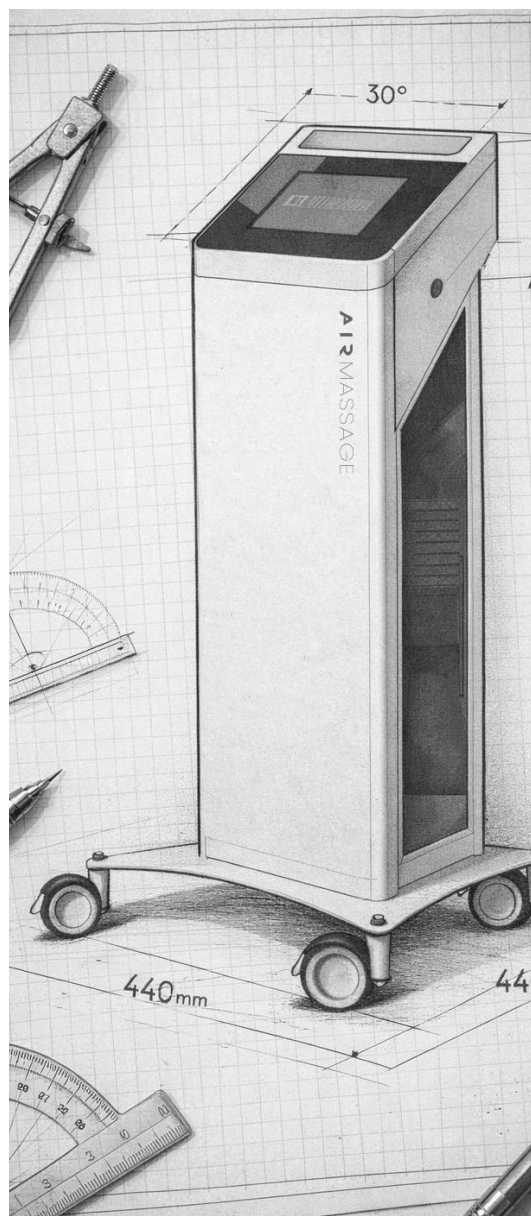



Estetica, dentro e fuori.

Il design è parte integrante di ogni progetto, non un semplice rivestimento. Ogni tecnologia nasce per funzionare bene in loco: comandi chiari, interfacce immediate, gesti semplici, impugnature sicure e un'ergonomia studiata per ridurre fatica e incertezze durante il trattamento. L'obiettivo è offrire strumenti intuitivi, coerenti con i ritmi operativi di un centro estetico, una spa o un ambulatorio di medicina estetica.

Allo stesso tempo, questi dispositivi sono pensati per valorizzare lo spazio. Linee pulite, proporzioni controllate e dettagli curati trasformano la macchina in un elemento che impreziosisce l'ambiente senza invaderlo, comunicando ordine e qualità.

La produzione è rigorosamente Made in Italy e integra dettagli in legno provenienti da pannelli riciclati, scelti per unire solidità, finitura e attenzione alla materia. Ne risulta una gamma di tecnologie durevoli, affidabili e curate, pensate per aumentare la qualità percepita del servizio e dell'esperienza complessiva in cabina.



Mani, materia, metodo.

“Ricordo ancora le prime prove: il prototipo sul tavolo, i componenti sparsi, i cavi da ordinare uno a uno, le viti da serrare con la coppia giusta, le superfici da riprendere finché la mano non “sentiva” che era corretto.

Si taglia, si adatta, si monta, si smonta, si ricontrolla.

Si ascolta il suono di un incastro che chiude bene, si cerca la scorrevolezza di una manopola, si rifinisce un bordo perché non deve solo essere bello: deve resistere, e deve stare bene nelle mani di chi lavora. È lì che ho capito cosa volevo costruire davvero: strumenti professionali che nascono dalla precisione, ma passano sempre dalla cura artigiana.”

Quell’inizio è diventato un metodo.

Ancora oggi i dispositivi KS non vengono “standardizzati” in sequenza come oggetti tutti uguali: vengono configurati, messi a punto e rifiniti con una componente manuale che permette di lavorare in modalità tailor made.

Significa adattare dotazioni, settaggi e dettagli operativi al contesto reale del partner: spazi, protocolli, flussi di lavoro, tipo di clientela.

E significa anche restare presenti dopo l’acquisto.

Il post-vendita, per KS, non è un modulo da compilare: è continuità di relazione. Supporto tecnico, manutenzione, aggiornamenti e assistenza che partono da una conoscenza diretta del prodotto, perché chi l’ha costruito ne conosce ogni passaggio. In un settore dove l’affidabilità vale quanto il risultato, questa è la differenza che ci fa lavorare più sereni, ogni giorno.

PRODOTTI



AIR MASSAGE
Il rituale della leggerezza

pag. 9



RF WAVE
Domina il calore

pag. 13



RF VACUUM
Ritmo. Energia. Risultati.

pag. 17



VORTEX
Un gesto profondo,
senza forzare

pag. 21



ROOLUP
Micro movimenti,
maxi risultati

pag. 25



JET MASSAGE
Tecnica alla velocità
del suono

pag. 29



HYDRAFACE
Puro equilibrio

pag. 33



EPIL LED
Oltre l'epilazione

pag. 37



AIR MASSAGE

Il rituale della leggerezza

AIRMASSAGE è un sistema di pressomassaggio a pressione morbida e progressiva, progettato per supportare i protocolli drenanti e il benessere circolatorio in modo controllato e altamente personalizzabile.

Gambali e manicotti avvolgono l'area di trattamento con una sequenza ritmica camera per camera, lavorando dal basso verso l'alto per favorire il deflusso dei ristagni e restituire una sensazione immediata di leggerezza e comfort.

AIRMASSAGE significa un'esperienza premium: un trattamento che viene percepito come cura e non come semplice tecnica, ideale nei percorsi contro ritenzione idrica, pesantezza e inestetismi della cellulite. In pochi minuti, trasforma la seduta in un momento di benessere profondo, aumentando soddisfazione, fidelizzazione e continuità del percorso.



AIR MASSAGE

PORTA I BENEFICI DELLA PRESSOTERAPIA AD UN NUOVO LIVELLO



CAVIGLIE SGONFIE



GAMBE LEGGERE



VITA SNELLA



PANCIA PIATTA



Trattamenti

Riduzione della ritenzione idrica

Favorisce il drenaggio dei liquidi in eccesso, riducendo gonfiori ed edemi

Riduzione della cellulite

La pressione esercitata migliora il flusso linfatico, contribuendo a ridurre l'aspetto della pelle a buccia d'arancia

Rimodellamento corporeo

Può favorire lo snellimento, soprattutto nelle gambe

Miglioramento della circolazione sanguigna

Aiuta a ridurre il dolore e il disagio legato a stasi venose

Aumento della tonicità ed elasticità cutanea

Migliore ossigenazione della pelle

Trattamento anti-stress

Riduce lo stress, contribuisce al benessere psico-fisico e offre una sensazione di leggerezza

Ciclo operativo

8-12 sedute

2 volte a settimana o 1 ogni 15 giorni

10-15 sedute

2-3 volte a settimana

10-15 sedute

2-3 volte a settimana

8-12 sedute

2 volte a settimana o 1 ogni 15 giorni

Sollievo immediato

Risultati visibili già dalle prime sedute

Sollievo immediato

Risultati visibili già dalle prime sedute



Accessori



Piede

Grazie alla tecnologia moderna si può godere di un massaggio ai piedi reale, come con la tradizionale digitopressione, aiuta a rilassare i muscoli, eliminare la fatica, lo stress e la tensione.



Bracciali

Specificatamente progettati e realizzati con lo scopo di esercitare un massaggio scorrevole sul braccio, il manicotto si compone di un materiale robusto, ultrasensibile e con una vestibilità perfetta.



Gambali

Riducono il gonfiore delle gambe dovuto ai ristagni di liquidi; alleviano il dolore e le infiammazioni alle gambe causate da linfedema; Favoriscono il recupero muscolare dopo eccessivi sforzi fisici.



Addome Air Massage

Aiuta soprattutto a drenare l'accumulo di tossine, grassi e liquidi indesiderati. Un cocktail che si accumula tra i tessuti e che questo manicotto può aiutare reindirizzare in modo che venga espulso più facilmente dall'organismo. Il massaggio all'addome è utile anche per stimolare il tratto intestinale.

Scheda tecnica

CARATTERISTICA	DESCRIZIONE
Pressione di esercizio	30-80 mmHg Range ottimale per trattamenti estetici
Pressione massima	Fino a 120-180 mmHg Su macchinari professionali, ma per estetica si rimane su valori bassi
Durata seduta	30-45 minuti (standard)
Tempo di gonfiaggio	10-15 secondi per camera (regolabile)
Tempo di mantenimento	60 secondi (variabile) Fase di compressione sostenuta
Tempo di sgonfiaggio	15-20 secondi (variabile) Fase di pausa e rilascio
Canali di uscita	10 Per trattare più zone contemporaneamente
Numero di camere per arto	4-8 camere indipendenti più precisione nell'onda pressoria



Domina il calore

RFWAVE è un sistema di radiofrequenza pensato per migliorare in modo visibile compattezza, tono e qualità dei tessuti con un approccio non invasivo, applicando il principio della cessione di calore: durante il trattamento, l'energia a radiofrequenza genera un incremento termico controllato che viene trasferito agli strati più profondi della pelle, stimolando i processi fisiologici legati alla tonicità e alla risposta del tessuto.

RFWAVE, insieme a manualità e cosmetici professionali, garantisce un trattamento confortevole; il calore propagato, infatti, favorisce una percezione immediata di trattamento attivo e mirato, utile nei percorsi rassodanti e tonificanti e nei programmi che puntano a una pelle più uniforme e distesa.

La tecnologia di RFWAVE supporta risultati progressivi seduta dopo seduta, con parametri modulabili in base all'area, alla sensibilità e all'obiettivo, aumentando soddisfazione e qualità del servizio.



RF WAVE

COMPATTA, RASSODA
E TONIFICA I TESSUTI
CON L'AZIONE DEL CALORE.



RIVITALIZZANTE



DETOSSINANTE



TONIFICANTE



SNELLENT



Trattamenti

	DURATA SEDUTA	FREQUENZA	CICLO OPERATIVO	MANTENIMENTO
Viso	20-30 minuti	2-3 volte alla settimana	6-12 sedute	2-4 volte al mese
Corpo	30-60 minuti	2-3 volte alla settimana	8-12 sedute	2-4 volte al mese
Scalp	30-35 minuti	2-3 volte alla settimana	6-10 sedute	1-2 volte al mese
Area intima	15-30 minuti	2 volte alla settimana	3-6 sedute	1 volta al mese


Effetti biologici diversificati in base alla temperatura raggiunta

MODALITÀ	TEMPERATURA	EFFETTI BIOLOGICI
Sub-termica	Fredda	Nessun aumento termico significativo Biostimolazione cellulare, accelerazione processi di guarigione, effetto antalgico
Termica moderata	Moderata	Aumento controllato Vascolarizzazione profonda, aumento apporto ossigeno e nutrienti, diminuzione spasmi muscolari, riduzione edemi
Ipertermica	Elevata	Iperattivazione metabolica, aumento volume e intensità flusso sanguigno profondo, riduzione rughe e linee sottili, miglioramento della cellulite. Elettrodi capacitivi rivestiti con strato isolante


Temperature massime individuali: 41-44°C in modalità capacitiva




Accessori

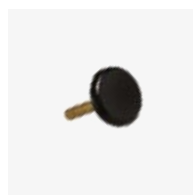


**Elettrodo
capacitivo**
Ø 30 mm

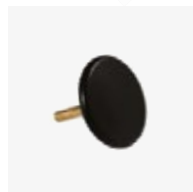


**Elettrodo
capacitivo**
Ø 50 mm

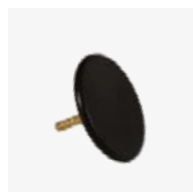


**Elettrodo
capacitivo**
Ø 70 mm

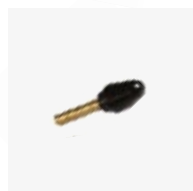

**Elettrodo
capacitivo**
Viso

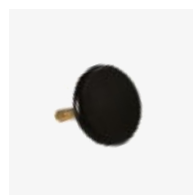

**Elettrodo
capacitivo**
Ø 40 mm

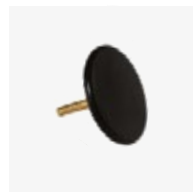

**Elettrodo
capacitivo**
Ø 60 mm



**Elettrodo
capacitivo**
Ø 80 mm



Massa
Piastra di ritorno
per manipolo RF

Vantaggi

RFWAVE è una radiofrequenza non invasiva progettata per migliorare progressivamente tono, compattezza e qualità dei tessuti. Durante il trattamento l'energia a radiofrequenza genera calore controllato che raggiunge gli strati più profondi della pelle, attivando una risposta fisiologica utile nei percorsi rassodanti e anti-age.

In cabina offre un'esperienza confortevole ma percepibile: il calore favorisce la vascolarizzazione e il drenaggio linfatico e stimola le fibre di collagene, favorendo una pelle più distesa e uniforme seduta dopo seduta.

Per questo si inserisce con efficacia nei protocolli viso e corpo dedicati a rilassamento cutaneo, rughe, cellulite e adiposità localizzate.



Ritmo. Energia. Risultati.

RF VACUUM unisce Radiofrequenza B-Polare Radiale e Vacuum per lavorare sia sulla qualità del tessuto (tono e compattezza) sia sulla componente “meccanica” legata a ristagni e irregolarità.

L'energia termica della radiofrequenza e l'azione ritmata dell'aspirazione aumentano la vascolarizzazione e favoriscono un'azione sinergica su adiposità localizzate e cellulite, stimolando la produzione di collagene per un naturale effetto di distensione e compattezza.

Il sistema offre 5 modalità di pulsazione, da più leggera a più profonde, per modulare intensità e comfort in base all'area e alla risposta della cliente, mantenendo una sensazione di massaggio endodermico controllato.

Per gli operatori significa proporre una tecnologia trasversale, utile nei percorsi corpo (rimodellamento, elasticità, trattamento degli inestetismi della cellulite) e nei trattamenti viso orientati a compattezza e lifting non invasivo, con un'elevata qualità percepita.



RF VACUUM

ELIMINA IL GRASSO IN ECCESSO E RIDUCE LA CELLULITE



ELIMINA IL GRASSO
IN ECCESSO



INCREMENTA L'OSSIGENAZIONE
CELLULARE E L'ELASTICITÀ DEI
TESSUTI



SNELLISCE IL GIROVITA
E LA CIRCONFERENZA
DELLE COSCE



RIDUCE LA CELLULITE SU
COSCE E GLUTEI E IL GONFIORE
POST LIPOSUZIONE



TRATTAMENTO LIFTING
VISO



Tabella comparativa

Caratteristica Capacitiva + Vacuum Resistiva Multipolare

	RESISTIVA MULTIPOLARE	CAPACITIVA CON VACUUM
Trattamenti: rimodellamento, drenaggio, riduzione volumi, tonificazione, rassodamento, lifting		
Profondità d'azione	Superficiale-media (derma)	Profonda (ipoderma, connettivo)
Tecnologia associata	Multi-elettrodi	Vacuum (aspirazione)
Meccanismo principale	Effetto dielettrico + massaggio meccanico	Resistenza tissutale diretta
Sensazione termica	Calore distribuito	Calore profondo e omogeneo
Trattamenti: cellulite, adiposità, ritenzione, lassità cutanea, rughe, tono		
Applicazione viso	Con elettrodi piccoli	Ottimale
Applicazione corpo	Con elettrodi grandi	Ottimale

Accessori



Manipoli

Questi manipoli sono progettati specificamente per associare radiofrequenza ed effetto vacuum.

Funzione principale

È adatto a trattare inestetismi come la cellulite ed è efficace anche su adiposità localizzate come le “maniglie dell’amore”.

Meccanismo d’azione

Il manipolo porta le cellule adipose (adipe) ad elevata temperatura, causandone l’apoptosi, ovvero la morte cellulare programmata, mentre il vacuum aiuta a sollevare e trattare il tessuto. I manipoli resistivi tripolari, quadripolari ed esapolari rappresentano l’evoluzione della radiofrequenza bipolare classica. Pur essendo tecnicamente una forma evoluta di tecnologia bipolare (in quanto non utilizzano una piastra di ritorno esterna come i monopolari), integrano più coppie di elettrodi all’interno dello stesso manipolo.

Prodotti complementari



Linea RF Vacuum

La formulazione della Crema Radiofrequenza è studiata per rispondere al calore e potenziare i risultati del trattamento. La sua formula è stata specificamente studiata per essere perfettamente compatibile con i sistemi vacuum, garantendo un utilizzo professionale senza rischi per le apparecchiature. I nostri prodotti sono formulati con principi attivi avanzati e studiati per lavorare in sinergia con le più moderne tecnologie estetiche, garantendo risultati sicuri, visibili e duraturi.

CARATTERISTICA

Complesso termo-attivo

DESCRIZIONE

Specifico per essere veicolato in profondità grazie al calore della radiofrequenza, stimolando i fibroblasti e la produzione di nuovo collagene

Paraffina (o emulsione termo-stabile)

Crea una barriera protettiva che distribuisce il calore in modo omogeneo, evitando il surriscaldamento localizzato dei tessuti e garantendo un trattamento sicuro e confortevole

Sali Minerali

Veicolano le micro-correnti in modo uniforme sulla superficie cutanea, ottimizzando la conducibilità e permettendo all’energia della radiofrequenza di penetrare in profondità in modo efficace e controllato

Scheda tecnica

CARATTERISTICA

Frequenza di emissione

DESCRIZIONE

Multi-frequenza: 0,6 MHz - 1,2 MHz - 2,4 MHz

Configurazioni

Bipolare, Tripolare, Quadripolare, esapolare

Potenza di uscita viso

50w

Potenza di uscita corpo

80w

Modalità di emissione

Continua (per effetto termico profondo)

Profondità di azione

Profonda (fino a 4-5 cm)

Controllo temperatura

Sensori integrati con feedback in tempo reale

Monitoraggio della resistenza tissutale

Costante



Un gesto profondo, senza forzare

VORTEX è un dispositivo estetico avanzato pensato per trattamenti viso e corpo che richiedono precisione, controllo e un'azione profonda senza aggressione superficiale. La tecnologia combina micro-getti liquidi ad alta pressione, pressione negativa controllata (vacuum) e una punta rotante, creando un'azione sinergica che lavora in modo selettivo sugli annessi cutanei. In pratica, il sistema consente la somministrazione intra-duttale di soluzioni direttamente all'interno di pori, follicoli piliferi e ghiandole sebacee e sudoripare, dove spesso si concentrano impurità, disfunzioni e alterazioni della qualità cutanea.

Il principio di lavoro richiama l'approccio della NPWT (Negative Pressure Wound Therapy), ma su un'area di trattamento ridotta e con un controllo manuale più puntuale, adatto alla routine professionale in cabina. Questa combinazione permette di superare le barriere cutanee in modo guidato, veicolando principi attivi in profondità e, allo stesso tempo, attivando i meccanismi naturali di rigenerazione della pelle, senza compromettere l'integrità dell'epidermide.



VORTEX

AGISCE IN PROFONDITÀ
RISPETTANDO
LA SUPERFICIE



AZIONE PROFONDA



TONIFICANTE



PURIFICANTE



Meccanismo operativo

Durante il movimento del manipolo sulla superficie cutanea:

- La pressione negativa (vacuum) aspira delicatamente la pelle, creando un sigillo e allineando i pori con gli ugelli
- La punta ruota (0-100 rpm), permettendo agli ugelli di incontrare sequenzialmente diversi pori
- Quando avviene l'allineamento tra orifizio del poro e micro-ugello, il getto ad alta pressione viene attivato
- Lo spazio follicolare viene riempito con la soluzione, che penetra in profondità
- I detriti e le impurità vengono aspirati nel sistema di raccolta

I micro-ugelli da 50 micron di diametro rappresentano il cuore tecnologico del sistema:

- Generano getti liquidi ad alta pressione (fino a 8 bar)
- Penetrano selettivamente all'interno dei pori senza danneggiare l'epidermide
- Rimuovono selettivamente detriti e impurità convogliandoli nella linea di drenaggio
- Prevengono la contaminazione incrociata grazie al sistema a circuito chiuso

Il vuoto controllato permette di:

- Applicare aspirazione solo sulla porzione di pelle delimitata dal perimetro della punta
- Modificare l'intensità sia della pressione negativa che della pressione del fluido durante il trattamento
- Normalizzare l'umidità cutanea e controllare eventuali infezioni ed essudato



Accessori



Manipolo

Azione 3 in 1

La caratteristica distintiva del sistema VORTEX è l'integrazione di tre tecnologie in un unico manipolo:

Pressione negativa (Vacuum)

- Aspirazione controllata della pelle
- Crea un micro-ambiente di vuoto, solleva delicatamente la pelle, allinea i pori con gli ugelli

Micro-getti ad alta pressione

- Infusione di soluzioni attraverso ugelli da 50µm
- Penetrazione intra-duttale senza aghi né trauma superficiale

Punta rotante

- Rotazione continua della testina
- Allineamento progressivo con i pori, copertura uniforme, massima efficacia

- **Meccanica di precisione** (ugelli monouso, infusione intrafollicolare).
- **Biochimica avanzata** (uso di acidi e sieri specifici come segnale).
- **Fisiologia naturale** (sfruttare e potenziare le capacità di rigenerazione del corpo).

È esattamente questa la direzione del mercato che hai giustamente identificato: trattamenti efficaci, sicuri, personalizzati e rispettosi dell'equilibrio naturale della pelle.



Scheda tecnica

CARATTERISTICA	DESCRIZIONE	NOTE
Diametro micro-ugelli	50 micron (µm)	Ø inferiore rispetto a un capello umano
Numero ugelli per punta	2 micro-ugelli	Design a doppio getto
Canali di trattamento	2 canali indipendenti	Per gestione simultanea di più trattamenti
Capacità serbatoi	500-1000 ml per soluzione	In base al modello
Sistema di raccolta	Contenitore per fluidi di scarto	da 500 o 1000 ml
Display	Touch screen a colori 8"	Interfaccia intuitiva
Timer	1-60 minuti regolabile	Per una gestione ottimale della seduta



Micro movimenti, maxi risultati

ROOLUP porta nel mondo dell'estetica professionale l'applicazione controllata della vibrazione a bassa frequenza, trasformandola in un'azione meccanica precisa e ripetibile. Il principio si basa su movimenti rapidi trasmessi attraverso microcompressioni e microvibrazioni generate da microsfere in silicone morbido: una dinamica che non "scuote", ma accompagna il tessuto con continuità, creando un vero e proprio effetto pompa.

È proprio questo effetto a rendere ROOLUP interessante nella pratica quotidiana: stimola il drenaggio linfatico profondo, sostiene la circolazione sanguigna e favorisce un'accelerazione del metabolismo tissutale, con un impatto diretto su cellulite e definizione. L'azione lavora in profondità su pelle, tessuto adiposo sottocutaneo e muscolatura, offrendo un approccio non invasivo ma efficace, utile per costruire percorsi progressivi di miglioramento del contorno corporeo.



ROOLUP

IL MOVIMENTO CHE RIDISEGNA LA PELLE



STIMOLA IL DRENAGGIO
E IL METABOLISMO



MIGLIORA LA DEFINIZIONE
CUTANEA



FAVORISCE
LA CIRCOLAZIONE



RIDUCE
LA CELLULITE



Trattamenti estetici

TRATTAMENTO	BENEFICIO
Cellulite	Frammentazione dei noduli adiposi, effetto anticellulite
Rimodellamento corporeo	Riduzione volumi, miglioramento contorni
Rassodamento cutaneo	Aumento elasticità edensità della pelle
Edemi e ristagno linfatico	Drenaggio linfatico, riduzione liquidi in eccesso
Obesità localizzata	Riduzione grasso localizzato (addome, cosce, glutei, braccia)
Pelle spenta / invecchiamento	Stimolazione collagenesi, effetto ringiovanente
Ptoşi gravitazionali	Ridefinizione contorni viso e corpo



Accessori



Agire su diverse aree del corpo con lo strumento più adatto. Ipoallergenico, sicuro a contatto con la pelle, facile da sanificare. Garantisce la scorrevolezza e la trasmissione ottimale delle vibrazioni. Un numero maggiore di sfere in un manipolo più piccolo permette un trattamento più delicato e preciso sulle curve del viso, collo e décolleté.

Benefici

+86%	PELLE TONICA	+45%	COMPATTEZZA DEL TESSUTO
-50%	PELLE A BUCCIA D'ARANCIA	1-3	RIDUZIONE DELLA CIRCOFERENZA*
+145%	AUMENTO DEL MICROCIRCOLO	-30%	RIDUZIONE DEI TEMPI**

Scheda tecnica

CARATTERISTICA	DESCRIZIONE
Sfere	Microsfere in silicone
Frequenza operativa	40-355 Hz
Durata seduta	30 minuti
Azioni principali	Drenaggio linfatico, ????
Frequenza di vibrazione	29-355 Hz (regolabile)
Frequenza viso	40-355 Hz
Frequenza corpo	29355 Hz
Profondità di penetrazione	~4-6 cm (strato adiposo)

* Per singola seduta (dato altamente variabile)

** Con la nuova tecnologia Essenza, in 12 sedute si può ottenere l'effetto di 18-20 sedute



Tecnica alla velocità del suono

JetMassage offre una tecnologia con un principio semplice e potente: trasformare il prodotto in micro-particelle e accompagnarlo dove normalmente la pelle oppone resistenza.

Attraverso una nebulizzazione ad alta velocità, l'attivo viene atomizzato e veicolato in modo più efficace, creando micro-canali temporanei che favoriscono la penetrazione fino agli strati più profondi. Tale approccio, noto come idroporazione o baroforesi, permette di unire in una sola seduta due esigenze centrali nei protocolli estetici: rinnovare la superficie e aumentare la capacità della cute di ricevere i principi attivi.

JetMassage consente di ottenere un peeling cutaneo efficace e di superare il limite della "penetrabilità", aprendo la strada a un'ampia gamma di applicazioni cosmetiche. Rende la pelle appare più luminosa e uniforme, più levigata al tatto, con una riduzione visibile delle piccole imperfezioni e dei segni superficiali e introduce un trattamento percepito come innovativo e anti-età.



JET MASSAGE

COSMETICA PERSONALIZZATA ALLA VELOCITÀ DEL SUONO



ANTI-ETÀ



ANTI-MACCHIA



TONIFICANTE



PURIFICANTE



Trattamenti - Le 4 fasi del protocollo

FASI

DURATA SEDUTA

Drenaggio linfatico

Variabile - Massaggio linfatico: Stimolazione della microcircolazione e drenaggio dei liquidi interstiziali per un'azione detox preliminare

Esfoliazione 45°

Esfoliazione meccanica e chimica: Rimozione delle cellule morte e delle impurità dagli strati superficiali dell'epidermide. Il getto ad alta velocità agisce come un "peeling" meccanico non abrasivo.

Idroporazione 90°

Infusione profonda: I principi attivi dei booster vengono sospinti in profondità attraverso i micro-canali creati nella fase precedente. È la fase chiave per la veicolazione transdermica.

Booster infusion 90°

Potenziamento: Applicazione aggiuntiva di sieri concentrati per amplificare e prolungare i risultati del trattamento.



4 Trattamenti specifici

Booster HA



Ideale per pelli secche, disidratate, spente o stressate.

Idratazione intensiva e immediata

Cosa fa:

- Trattiene l'acqua come una spugna, idratando in profondità
- Distende visivamente le linee sottili di disidratazione
- Prepara la pelle ai trattamenti successivi

Risultato:

Pelle morbida, distesa, con un aspetto fresco e "ripieno".

Illuminante



Ideale per: pelli spente, opache, con macchie o incarnato disomogeneo.

Glow immediato e incarnato radioso

Cosa fa:

- Rimuove le cellule morte e porta in superficie cellule nuove e luminose
- Neutralizza i radicali liberi che spengono l'incarnato
- Schiarisce macchie e discromie per un colorito omogeneo

Risultato:

Un vero effetto "glow". Pelle subito più viva, luminosa e radiosa.

Mandelico AHA



Ideale per: pelli sensibili, reattive, con rosacea, acne o texture irregolare.

Esfoliazione delicata, anche per pelli sensibili

Cosa fa:

- Esfolia delicatamente rimuovendo le cellule morte
- Purifica e libera i pori ostruiti
- Uniforma l'incarnato e attenua le imperfezioni

Risultato:

Pelle liscia, luminosa e omogenea. Un'esfoliazione efficace ma rispettosa.

Anti-aging



Ideale per: pelli sensibili, reattive, con rosacea, acne o texture irregolare.

Prevenire, rallentare e contrastare i segni del tempo

Cosa fa:

- Stimola la produzione di collagene ed elastina
- Contrasta la perdita di tonicità e compattezza
- Riduce visivamente rughe e linee sottili

Risultato:

Pelle più soda, distesa e giovane.

Tecnologia e funzionamento

Il JET MASSAGE è un dispositivo estetico all'avanguardia che utilizza la tecnologia a getto d'aria pressurizzata per il trattamento non invasivo della pelle. Il sistema genera un flusso bifasico composto da gas (ossigeno) e micro-gocce di soluzione liquida (sieri e booster) accelerate a velocità elevate che viene applicato sulla cute attraverso manipoli specifici, creando micro-canali temporanei nell'epidermide che consentono la penetrazione transdermica dei principi attivi senza l'uso di aghi, senza dolore e senza danneggiare la barriera cutanea.

Parametri di pressione

La pressione operativa del dispositivo è calibrata in base all'area anatomica da trattare:

Viso

1 bar – Pressione delicata per aree sensibili e superfici ridotte

Corpo

3 bar – Pressione più elevata per aree estese e tessuti più spessi



Puro equilibrio

HYDRA FACE è un trattamento di idrodermoabrasione non invasivo progettato per offrire, in un'unica seduta, una sequenza completa: deterzione profonda, esfoliazione controllata, estrazione delle impurità e idratazione.

Agisce tramite un vortice controllato brevettato che combina due effetti complementari: un peeling chimico delicato e la microdermoabrasione, con la possibilità di infondere sieri specifici in base all'obiettivo.

La punta a spirale genera un effetto vortice capace di rimuovere cellule morte, sebo e residui superficiali con precisione, contemporaneamente veicola principi attivi idratanti e nutrienti negli strati superficiali della pelle. Questo significa lavorare con un trattamento percepito come immediatamente "pulito" e professionale, ideale per migliorare texture, luminosità e comfort cutaneo, e per preparare la pelle a trattamenti successivi.



HYDRAFACE

PULIZIA E IDRATAZIONE PER DONARE NUOVA VITA ALLA PELLE



IDRATANTE



PURIFICANTE



TONIFICANTE



LEVIGANTE



Trattamenti

TIPOLOGIA	BOOSTER	PRINCIPIO ATTIVO	INDICAZIONI
Detox	Purificante	Acido salicilico 2%, acido glicolico 10%, niacinamide	Pelle impura, acneica, grassa, pori dilatati
Idratante	Acido ialuronico a basso/alto peso molecolare	Glicerina, alghe	Pelle disidratata o secca
Illuminante	Vitamina C pura (10-15%)	Acido cogico, arbutina, acido ferulico	Iperpigmentazioni, pelle spenta, macchie solari
Anti-Age/Rassodante	Peptidi (Matrixyl)	Antiossidanti, acido ialuronico, resveratrolo	Rughe, perdita di tonicità, pelle matura
Lenitivo/Post-trattamento	Estratto di ippocastano	Bisabololo, aloe vera, pantenolo	Pelle sensibile, reattiva, post-trattamento



Accessori




Manipolo Hydrodermoabrasione

Grazie ad un meccanismo di vortice e TIPS intercambiabili, esegue in un'unica seduta un ciclo completo di pulizia e ringiovanimento, composto da 3 fasi principali:

- Pulizia ed esfoliazione
- Estrazione e idratazione
- Infusione e protezione

La sua caratteristica è operare in due modalità contemporaneamente, ovvero aspira le impurità mentre eroga sieri, ottimizzando così i tempi e l'efficacia del trattamento.

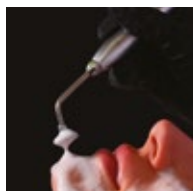

Manipolo Mousse

Questo tipo di erogazione è molto apprezzato per la deterzione:

- Delicatezza: la schiuma è soffice e avvolgente, ideale per pelli sensibili
- Praticità: il prodotto è pronto all'uso
- Efficacia: la schiuma aiuta a rimuovere le impurità rispettando l'equilibrio della pelle



Aerografo

Migliora tonicità ed elasticità, stimola collagene ed elastina, contrasta acne e invecchiamento cutaneo, lenisce pelli sensibili.



Manipolo Freddo

Pelle più tonica, luminosa e distesa, riduzione di rughe sottili e pori dilatati.

Uso consigliato: viso, collo e décolleté.

Ideale per chi cerca un trattamento piacevole e non invasivo, con un effetto immediato di drenaggio e ossigenazione.

L'alternanza termica è un potente stimolo per il ricambio cellulare e il miglioramento del microcircolo.

Utilizzo

TIPOLOGIA	UTILIZZO	CARATTERISTICA
Punta standard viso	Trattamento completo viso	Diametro 15-20 mm
Punta di precisione	Contorno occhi, labbra	Diametro 8-10 mm
Punta corpo	Trattamento aree estese	Diametro 30-40 mm
Punta per acne	Azione mirata su pelle impura	Design specifico per estrazione
Materiale	Plastica medica monouso	Igiene e sicurezza



Oltre l'epilazione

Epil LED propone un nuovo approccio all'epilazione professionale, basato su luce LED organizzata in una matrice dedicata e combinata con NIR. Presentiamo un'alternativa al laser diodo tradizionale, con un'impostazione orientata alla cabina: maggiore comfort, percezione di minore dolore e una gestione più semplice e continua delle sedute, anche nei percorsi strutturati.

Il cuore del sistema è la Matrice LED quantica, progettata per massimizzare l'assorbimento della luce da parte dei follicoli piliferi.

La componente NIR amplia il valore del trattamento contribuendo alla fotobiostimolazione cutanea, al rinnovamento cellulare e al supporto della microcircolazione, con benefici su elasticità e qualità della pelle.

Per il centro significa anche efficienza: minori costi e manutenzione, consumi energetici contenuti e facilità d'uso nel lavoro quotidiano.



EPIL LED

I BENEFICI DELLA TECNOLOGIA LED AL SERVIZIO DELL'EPILAZIONE



EPILAZIONE
FOTOBIOSTIMOLANTE



RIDOTTA PERCEZIONE
DEL DOLORE



FAVORISCE
LA CIRCOLAZIONE



MIGLIORA L'ELASTICITÀ
DELLA PELLE



Principali vantaggi

AREA	VANTAGGIO	DESCRIZIONE
Sicurezza e comfort	Sicurezza per gli occhi	I laser LED emettono una luce meno intensa e più sicura per l'occhio umano rispetto ai laser diodo, che possono causare danni permanenti se non utilizzano adeguate protezioni oculari.
	Minore dolore percepito	Numerose ricerche evidenziano che i trattamenti con laser LED sono meno dolorosi rispetto a quelli con laser diodo, grazie alla minore intensità della luce e all'uso di tecnologie di raffreddamento integrate.
Costi e manutenzione	Economico	I dispositivi LED tendono ad essere più economici da mantenere rispetto ai laser diodo, il che li rende una scelta più vantaggiosa per molte cliniche estetiche.
	Basso consumo energetico	I laser LED consumano meno energia elettrica, contribuendo a ridurre i costi operativi a lungo termine.
Versatilità e applicazioni	Adattabilità	I laser LED possono essere utilizzati su una varietà di tipi di pelle e colori di peli, rendendoli adatti ad un pubblico più ampio.
	Tecnologia in evoluzione	I sistemi a LED stanno continuamente migliorando in termini di efficacia e sicurezza, grazie ai progressi della tecnologia dei semiconduttori.
Facilità d'uso	Setup semplice	I dispositivi a LED sono generalmente più facili e intuitivi da utilizzare.



Prodotti complementari




Fase 1: Igienizzante (pre-trattamento)

È il primo step del protocollo: si applica prima della seduta per preparare la cute, ridurre la carica microbica superficiale e impostare una base pulita e uniforme. Serve a standardizzare l'inizio del trattamento, migliorando la sensazione di "pulizia" e la qualità percepita già dal primo contatto in cabina.



Fase 2: Fluid Gel (conduttore NIR)

È il gel di lavoro: funge da conduttore ideale per i fotoni NIR, ottimizzando la trasmissione dell'energia e la scorrevolezza del manipolo. In pratica aiuta l'operatore a lavorare in modo più omogeneo e controllato, mantenendo comfort e continuità durante tutta la seduta.

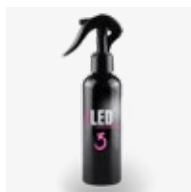

Fase 3: Lenitivo (post-trattamento)

È lo step di chiusura: si applica subito dopo per riportare comfort, ridurre la reattività e supportare i processi di riparazione cutanea. Completa l'esperienza in modo coerente con un protocollo "dermatologico" a 3 fasi, trasformando l'epilazione in un trattamento più completo e premium.

Manipolo NIR

Il LED NIR agisce tramite la fotobiostimolazione: l'energia luminosa viene assorbita dai mitocondri delle cellule, potenziando il loro metabolismo energetico (produzione di ATP).

Questo "boost" di energia attiva i fibroblasti, stimolando una nuova produzione naturale di collagene ed elastina. Il risultato è un miglioramento visibile della texture della pelle, che appare più tonica, luminosa e compatta, con una riduzione delle linee sottili e un'accelerazione dei processi rigenerativi.



DATI TECNICI

AIR MASSAGE



CARATTERISTICA	DESCRIZIONE
Dimensioni L x A x P (cm)	41 x 106 x 32
Peso	35 kg
Tipo di apparecchio	ad uso Estetico
Alimentazione	220-240 Volt 50 Hz
Potenza	80W
Display	8,0 pollici, risoluzione 800*600 pixel, 16,7 milioni di colori, TN-TFT-LCD

RF WAVE



CARATTERISTICA	DESCRIZIONE
Dimensioni L x A x P (cm)	41 x 106 x 32
Peso	35 kg
Tipo di apparecchio	ad uso Estetico
Alimentazione	220-240 Volt 50 Hz
Potenza	50W tipo BF. MAX densità di corrente sugli elettrodi è di 10 mA/cm².
Display	8,0 pollici, risoluzione 800*600 pixel, 16,7 milioni di colori, TN-TFT-LCD

RF VACUUM



CARATTERISTICA	DESCRIZIONE
Dimensioni L x A x P (cm)	41 x 106 x 32
Peso	35 kg
Tipo di apparecchio	ad uso Estetico
Alimentazione	220-240 Volt 50 Hz
Potenza	25W resistiva - 50W capacitiva tipo BF. MAX densità di corrente sugli elettrodi è di 10 mA/cm².
Display	8,0 pollici, risoluzione 800*600 pixel, 16,7 milioni di colori, TN-TFT-LCD

VORTEX



CARATTERISTICA	DESCRIZIONE
Dimensioni L x A x P (cm)	51 x 120 x 35
Peso	45 kg
Tipo di apparecchio	ad uso Estetico
Alimentazione	220-240 Volt 50 Hz
Potenza	180W
Display	8,0 pollici, risoluzione 800*600 pixel, 16,7 milioni di colori, TN-TFT-LCD

ROOLUP



CARATTERISTICA	DESCRIZIONE
Dimensioni L x A x P (cm)	51 x 120 x 35
Peso	45 kg
Tipo di apparecchio	ad uso Estetico
Alimentazione	220-240 Volt 50 Hz
Potenza	120W
Display	8,0 pollici, risoluzione 800*600 pixel, 16,7 milioni di colori, TN-TFT-LCD

JET MASSAGE



CARATTERISTICA	DESCRIZIONE
Dimensioni L x A x P (cm)	51 x 120 x 35
Peso	45 kg
Tipo di apparecchio	ad uso Estetico
Alimentazione	220-240 Volt 50 Hz
Potenza	180W
Display	8,0 pollici, risoluzione 800*600 pixel, 16,7 milioni di colori, TN-TFT-LCD

HYDRAFACE



CARATTERISTICA	DESCRIZIONE
Dimensioni L x A x P (cm)	51 x 120 x 35
Peso	45 kg
Tipo di apparecchio	ad uso Estetico
Alimentazione	220-240 Volt 50 Hz
Potenza	180W
Display	8,0 pollici, risoluzione 800*600 pixel, 16,7 milioni di colori, TN-TFT-LCD

EPIL LED



CARATTERISTICA	DESCRIZIONE
Dimensioni L x A x P (cm)	54 x 33,2 x 44,2
Peso	28,5 kg
Tipo di apparecchio	ad uso Estetico
Alimentazione	220 - 240 Vac, 50 - 60 Hz
Potenza	900W
Display	LCD

Conforme al DECRETO 15 ottobre 2015, n. 206 scheda N. 13A e N. 16C

KS Beauty Trend fornisce ai propri clienti un consolidato servizio di assistenza e assicura la massima collaborazione post vendita, garantendo ogni prodotto per 2 anni dalla consegna.

Il servizio assistenza clienti è attivo in questi orari e a questo indirizzo:

Lun - Ven 09:30 / 12:30 e 15:00 / 17:00

contatto@ksbeautytrend.it

KS health and beauty Srl

Via Newton, 12 - 20016 Pero (MI)

Tel.: +39 02 31056037

Email: info@ksbeautytrend.it

ksbeautytrend.it

Art direction & Graphic Design: Luca De Carli | 328.3831992 | idee@lucadecarli.com

Photographer: Santino Fiocco

Stampa: Promografica snc

Questo catalogo è stampato su carta Favini Shiro Echo, realizzata con 100% di fibre riciclate, certificata FSC™, riciclabile e biodegradabile

© Copyright 2026 / KS BEAUTY TREND Tutti i diritti sono riservati

*Per motivi di stampa i colori riprodotti sul catalogo potrebbero non corrispondere fedelmente ai colori reali.
L'azienda si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e stilistiche dei propri prodotti in qualsiasi momento, qualora lo ritenga necessario.*



KS health and beauty Srl

Via Newton, 12 - 20016 Pero (MI)

Tel.: +39 02 31056037

Email: info@ksbeautytrend.it

P.IVA IT010694040964

ksbeautytrend.it